




dynamic cupping & red light therapy



instrukcja obsługi





Wyłączny dystrybutor na Polskę:

MYISO pl

**przyspiesz swoją
naturalną regenerację**

Witamy w społeczności Aerify

Przede wszystkim chcielibyśmy pogratulować Tobie doskonałego wyboru, jakim jest zakup urządzenia Aerify Cupper! Oznacza to, że rozumiesz znaczenie i potrzebę szybkiej regeneracji podczas aktywnego trybu życia zarówno w czasie intensywnego wysiłku fizycznego ale także ciężkiej pracy i trudniejszych okresach życia.

Aerify Cupper to połączenie nowoczesnej technologii dynamicznej bańki i tradycyjnej terapii leczniczej, która jest stosowana od wieków w celu złagodzenia bólu, stanu zapalnego oraz poprawy relaksu i ogólnego samopoczucia. Terapia światłem czerwonym (RLT) to zabieg, który wykorzystuje światło czerwone o niskiej długości fali, aby poprawić wygląd skóry, na przykład zmniejszyć zmarszczki, blizny, zaczerwienienie i trądzik, zmniejszyć stan zapalny w komórkach i zwiększyć krążenie krwi.

Prowadząc aktywny tryb życia, super przenośny Aerify Cupper będzie idealnym narzędziem regeneracyjnym do użytku domowego, w podróży, biurze, na obozów szkoleniowych, zawodach sportowych a nawet jako profesjonalne urządzenie w gabinetach fizjoterapeutów i masażystów.

Co jest w pudełku?

Dodatkowa mała bańka z zakrzywioną powierzchnią dla lepszego dopasowania do szyi i ramion



Pilot



3x dodatkowe bawełniane filtry



Pasek nośny



Aerify Cupper z bańką w regularnym rozmiarze



Twardy pokrowiec

Interfejs Aerify Cupper



Jak korzystać z Aerify Cupper?

- Przeczytaj **instrukcję obsługi i przeciwwskazania**, aby upewnić się, że produkt jest odpowiedni do Twojego zamierzonego zastosowania.
- Używaj **go tylko bezpośrednio na skórze** bez ubrania. Opcjonalnie możesz użyć olejku do masażu, żelu lub balsamu, aby uzyskać bardziej komfortowy masaż.
- Umieść Aerify Cupper na odpowiednim obszarze ciała, **naciśnij i przytrzymaj przycisk On/Off**. Ssanie jest domyślnie włączone.
- Naciśnij przycisk **M**, aby przetaczać się między **5 różnymi trybami ssania** wskazanymi przez liczbę zielonych diod LED.
- Naciśnij przycisk **Poziomu mocy ssania**, aby przetaczać się między **5 natężeniami mocy ssania** wskazanymi przez liczbę czerwonych diod LED.
- Naciśnij przycisk **Światła czerwonego**, aby **włączyć / wyłączyć** terapię światłem czerwonym.
- Naciśnij przycisk **pauza/start**, aby wstrzymać ssanie i/lub ponownie uruchomić je umieszczeniu bańki na zamierzonym obszarze ciała.

Ustawienia mocy ssania i czasu

Aerify Cupper ma 5 poziomów mocy ssania. Naciśnij przycisk zasilania ssania (⏻), aby przełączać się między trybami ssania wskazanymi przez liczbę **czerwonych diod LED**.

Domyślnie **poziom mocy ssania wynosi 1**.

W zależności od osobistych preferencji wybierz jeden z poziomów od **1 do 5**.

W przypadku bańki o zakrzywionej powierzchni zalecamy użycie co najmniej **poziomu 3**.

Czerwony wskaźnik LED pokazuje aktualny poziom intensywności.

Domyślnie **czas** dla trybów od 1 do 4 wynosi 12 minut (tryb 5 - 20 minut). Zaleca się stosowanie dynamicznej bańki **4-12 minut** na każde miejsce.

Wybierz Twój tryb pracy bańki

Wybierz przycisk M
aby zmienić tryb pracy
bańki



Aerify Cupper ma **5 różnych trybów ssania** do różnych celów bańki. Naciśnij przycisk M, aby przetączyć się między trybami ssania wskazanymi **przez liczbę zielonych diod LED.**

Tryb 1 - lekki, **rytmiczny masaż** idealny na rozgrzewkę





Tryb 2 - delikatny **masaż falowy** dla obolałych mięśni

Tryb 3 - Tryb **powolnej wzrostu mocy** do maksimum, idealny do profesjonalnej terapii bańkami ślizgowymi

Tryb 4 - Tryb **szybkiego wzrostu mocy** do maximum, idealny do profesjonalnej terapii bańkami ślizgowymi

Tryb 5 - Intensywny, **progresywny masaż rytmiczny** zapewniający najlepsze wrażenia z masażu ssania

Cykle 5 trybów ssania

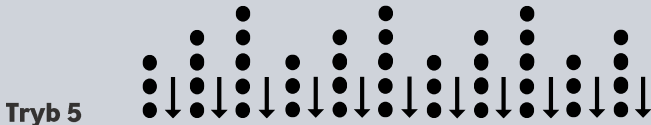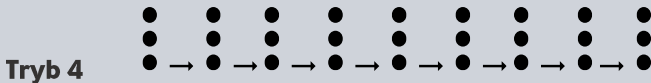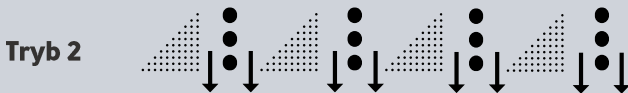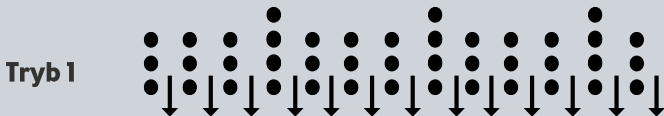

Używanie Aerify Cupper z olejkami i płynami do masażu

Oczywiście możesz użyć olejku do masażu, żelu lub balsamu, aby uzyskać bardziej komfortowy masaż. W przypadku profesjonalnych baniek dynamicznych zalecane jest stosowanie ciekłe medium.

Przed nałożeniem Aerify Cupper na ciało użyj olejku do masażu lub balsamu, rozprowadzając go równomiernie i zostawiając cienką warstwę na skórze. Do masażu bańkami przesuwными zalecamy użycie trybów 3 i 4.

Uruchom Aerify Cupper, odczekaj co najmniej 30 sekund, aż siła ssąca unieruchomi urządzenie na skórze. Delikatnie przesun końcówkę bańki w kierunku włókien mięśniowych. Upewnij się, że skóra jest dobrze nawilżona, aby uniknąć dyskomfortu i uszkodzenia skóry.

Używaj płynów i olejków ostrożnie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia spowodowane niewłaściwym użyciem produktów płynnych.

Jak działa Aerify Cupper?

Aerify Cupper wytwarza siłę ssącą wewnątrz bańki, która zasysa skórę w górę. Zasysane w bańce powietrze zasysając skórę pobudza krążenie płynu w leczonym obszarze. Ta siła ssania rozszerza się i rozrywa małe naczynia krwionośne (naczynia włosowate) pod skórą. Twoje ciało traktuje obszar skóry pod bańką jako miejscowy uraz zwiększając krążenie krwi w miejscu, w którym umieszczane są bańki. Może to złagodzić napięcie mięśni, co może poprawić ogólny przepływ krwi i promować procesy naprawy i regeneracji komórek. Pomaga to również w tworzeniu nowych tkanek łącznych i tworzeniu nowych naczyń krwionośnych w tkance.

Aerify Cupper przewyższa klasyczną terapię bańkami próżniowymi dzięki dynamicznemu ssaniu. Naprzemienne zasysanie i uwalnianie powietrza poprawia wydajne krążenie krwi i przyspiesza proces regeneracji. Dodatkowo terapia światłem czerwonym pomaga osiągnąć jeszcze skuteczniejsze leczenie, zwiększając korzyści płynące z baniek, które mogą obejmować relaksację, łagodzenie bólu, redukcję stanu zapalnego i ogólny szybszy powrót do zdrowia.



Przeciwwskazania

- Nie należy stosować Aerify Cupper w okresie ciąży lub z implantami medycznymi (np. rozrusznikami serca) lub podtrzymującymi życie medycznymi urządzeniami elektronicznymi,
- Ciężka choroba sercowo-naczyniowa,
- Arytmia
- Wysokie ciśnienie krwi,
- Zaburzenia krzepnięcia,
- Ciężki obrzęk płuc,
- Ostre infekcje,
- Osteoporoza
- Zatorowość płucna,
- Ostre zakrzepowe zapalenie żył,
- Zakrzepica żył głębokich,
- Złamania lub zwichnięcia kości,
- Otwarte rany lub stany zapalne,
- Ciężkie alergie skórne lub choroby zakaźne skóry
- Nerwica, wysoka gorączka, drgawki, skurcze, niepokój maniakalny,
- Uczucie bólu
- Niewyjaśnione i niepokojące zmęczenie,
- Okres okołoperacyjny

!!! Skonsultuj się z lekarzem, jeśli nie masz pewności, czy możesz użyć dynamicznego sprężania powietrza

Important warnings

- Przed użyciem Aerify Cupper, skonsultuj się z lekarzem lub lekarzem. Ten produkt nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia lub zapobiegania chorobom.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci
- Nie stosować na rany, blizny lub na obszary w pobliżu serca
- Jeśli wystąpi dyskomfort, należy przerwać stosowanie go i natychmiast poinformować o tym lekarza
- Unikaj używania dynamicznej bańki do jednej części skóry zbyt długo (ponad 12 minut), aby uniknąć uszkodzenia skóry
- Nie stosować na obszarach poddanych wcześniejszej terapii bańką
- Nie stosować na miejscach wrażliwych, narządach zmysłów, twarzy, miejscach intymnych, dużych naczyniach krwionośnych lub w pobliżu serca
- Nie używaj uszkodzonego produktu
- Produkt nie zastępuje leczenia medycznego
- Produkt zawiera baterie litowe. Prosimy nie demontować, nie modyfikować i nie zanurzać w wodzie ani nie wrzucać do ognia. Produkt należy poddać recyklingowi po zakończeniu okresu użytkowania.
- Używać produktu zgodnie z instrukcjami.
- Po użyciu cuppera może wystąpić zaczerwienienie lub siniak. Czerwone plamy zwykle znikają po 3-5 dniach.
- Przeznaczony dla osób powyżej 16 roku życia
- Nie używaj cuppera podczas prowadzenia samochodu lub obsługiwanie ciężkich maszyn
- Nie pozostawiaj cuppera w pobliżu ciepła lub na bezpośrednim świetle słonecznym.
- Podczas wyrzucania sprzętu, baterii i opakowań należy je utylizować zgodnie z procedurami i zasadami utylizacji.

Czyszczenie i konserwacja

Po każdym użyciu wyłącz i wyczyść nogawki **suchą szmatką**. **Nie używaj** kwaśnych lub zasadowych środków czyszczących, alkoholu, rozcieńczalników, benzyny, zmywacza do paznokci ani żadnych innych rozpuszczalników. **Nie używaj** twardych szczotek i gąbek, aby uniknąć zadrapań i uszkodzeń. **Nie zanurzaj** w wodzie ani nie polewaj urządzenia wodą podczas czyszczenia – bateria **NIE** jest wodoodporna.

Nakładki należy stosować i przechowywać wyłącznie w temperaturze pokojowej.

Przechowuj Aerify cupper w bezpiecznym i suchym miejscu, z dala od źródła ciepła i z dala od bezpośredniego światła słonecznego.


Filtry bawełniane są przeznaczone do blokowania kurzu i płynów w celu zapewnienia wewnętrznej czystości bańki. Proszę sprawdzić i wymienić filtr w zależności od częstotliwości użytkowania.



Ładowanie cuppera

Aby naładować Aerify Cupper, użyj USB typu C i podłącz go do ładowarki lub laptopa.

Czas ładowania Aerify Cupper wynosi ~ 2,5 godziny dla 3 godzin pracy na baterii.

Wskaźnik ładowania  jest czerwony podczas ładowania i zmienia kolor na zielony, gdy cupper jest w pełni naładowany.

Zachowuj gniazdo ładowania cuppera w czystości i nie kontynuuj ładowania cuppera, gdy wskaźnik akumulatora zmieni kolor na zielony.

Nie używać cuppera podczas ładowania.



Informacje techniczne

- Waga - 0.2 KG
- Wymiary – 9 x 9 x 7 cm
- Moc– 5 W
- Wyjście ładowarki: DC 5V - 2A
- Czas ładowania: 2.5 godz.
- Długość fali światła czerwonego: 630-670nm
- Moc ssania: -60~0 kPa
- Pojemność baterii: 1800 mAh



Rozwiązywanie problemów

Nie wahaj się skontaktować z nami pod hello@aerifyrecovery.com w przypadku jakichkolwiek problemów technicznych. Tutaj zebraliśmy najczęściej zadawane pytania, które mogą Ci pomóc w problematycznych sytuacjach:

CUPPER NIE WŁĄCZA SIĘ

- Naładuj baterię. Zajmuje ok. 2,5h ładowania do 3h użytkowania.
- Naciśnij i przytrzymaj mocno przycisk włączania/wyłączania przez 3 sekundy.

SŁABA BATERIA lub NIE MOŻNA NAŁADOWAĆ BATERI

- Przed użyciem upewnij się, że cupper jest w pełni naładowany (min. 2,5h).
- Spróbuj ponownie z innym gniazdem
- Wyciągnij ładowarkę i upewnij się, że jest na swoim miejscu
- Sprawdź i wyczyść ładowarkę oraz gniazdo ładowania
- Wymień ładowarkę lub kabel ładujący

SŁABA MOC SSANIA

- Sprawdź wlot i wylot powietrza, jeśli nie jest zablokowany
- Ponownie zainstaluj i dokręć plastikową bańkę
- Sprawdź przycisk zasilania
- Sprawdź, czy filtr wymaga wymiany

Gwarancja i naprawa

Zawsze dbamy o jakość oferowanych produktów, dlatego też udzielamy 2-letniej (24-miesięcznej) gwarancji, obowiązującej od daty zakupu, zarówno na urządzenie, jak i nogawki. Gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie wady fabryczne! Gwarancja nie będzie obowiązywać, jeśli problemy z działaniem urządzenia zostały spowodowane zaniedbaniem ze strony użytkownika, np. przypadkowym upuszczeniem urządzenia, umieszczeniem na urządzeniu ciężkiego przedmiotu, umożliwieniem dzieciom zabawy urządzeniem, wystawieniem systemu na długotrwałe oddziaływanie promieni słonecznych, korzystaniem z systemu w saunie, pozostawieniem systemu w mokrym lub wilgotnym miejscu lub doprowadzeniem do jakichkolwiek innych uszkodzeń będących konsekwencją nieprawidłowego korzystania z systemu.

W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów technicznych, skontaktuj się z nami pod adresem:

hello@aerifyrecovery.com, a chętnie pomożemy Ci w znalezieniu najlepszego rozwiązania.

przyspiesz swoją
naturalną
regenerację



www.aerifyrecovery.com



Wyłączny dystrybutor na Polskę:

MYISO **pl**